


*Enjoy mobility.*



**MANUELLE  
ROLLSTÜHLE**

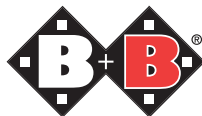

# MODELLÜBERSICHT

## MANUELLE ROLLSTÜHLE

### Standardrollstühle



**S-Eco 300**

**S-Eco 2**

### Leichtgewichtrollstühle



**Pyro Light Optima**

**Pyro Start Plus**

**Pyro Light**

**Pyro Start**

**Vida**

### Multifunktionsrollstühle



**Triton**

**Protego**

**S-VR**

### Adaptivrollstühle



**BX 11**

**BX 11S**

## AUCH ALS SONDERGRÖSSEN ERHÄLTLICH

**XL Modell**  
(Belastbar bis 170 kg)

S-Eco 300 XL  
Pyro Light XL  
Pyro Light Optima XL

**XXL Modell**  
(Belastbar bis 250 kg)

Econ XXL  
Toilettenrollstuhl XXL

**SL Modell**  
(Körpergröße bis 2,10 m)

Pyro Start Plus SL  
Protego SL  
TS-1 SL

AUCH ALS  
XL PRODUKT  
ERHÄLTlich



#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- Sitzhöhe einstellbar
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

#### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne***	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten***	450 - 490 mm
Rückenhöhe***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	4°
Unterschenkellängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1080 mm
Gesamtlänge**	775 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.0106



LEERGEWICHT \*\*  
AB 18,4 KG



BREITE  
SB + 200 MM



HÖHE  
935 MM



LÄNGE\*  
1080 MM



NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen





#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Steckachsen
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Rückensystem mit Lumbalnicker
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Radstandverlängerung
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

#### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne ***	500 mm
Sitzhöhe hinten***	480 mm
Rückenhöhe ***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	3°
Unterschenkellängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 180 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	270 mm
Gesamtlänge*	1100 mm
Gesamtlänge**	815 mm
Gesamthöhe	925 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit
HMV-Nr.	18.50.02.0104



LEERGEWICHT\*\*  
AB 18,2 KG

BREITE  
SB + 180 MM

HÖHE  
925 MM

LÄNGE\*  
1100 MM

NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen

# PYRO LIGHT OPTIMA

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUCH ALS  
XL PRODUKT  
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT\*\*  
AB 16,8 KG



BREITE  
SB + 200 MM



HÖHE  
860 MM



LÄNGE\*  
1100 MM



NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

# PYRO LIGHT OPTIMA

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Steckachsen
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Anpassrücken
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Seitenteile tiefen-, höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Lenkräder 6“
- Antriebsräder 22“
- Radstandverlängerung
- Sitzkissen 50 mm
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	415 - 515 mm
Sitzhöhe vorne***	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten***	400 - 500 mm
Rückenhöhe***	400 - 460 mm
Rückenwinkel	100°
Sitzwinkel	0 - 11,5°
Unterschenkellängen	400 - 480 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	310 mm
Gesamtlänge*	1100 mm
Gesamtlänge**	840 mm
Gesamthöhe	860 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.2107

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen

# PYRO START PLUS

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUCH ALS  
SL PRODUKT  
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT \*\*  
AB 14,2 KG

BREITE  
SB + 200 MM

HÖHE  
920 MM

LÄNGE\*  
1050 MM

NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

# PYRO START PLUS

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Armlehnenhöhe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückensystem mit Lumbalnicker
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	400 - 440 mm
Sitzhöhe vorne***	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten***	415 - 475 mm
Rückenhöhe***	420 - 440 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	0° - 4,5°
Unterschenkellängen	420 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	295 mm
Gesamtlänge*	1050 mm
Gesamtlänge**	800 mm
Gesamthöhe	920 mm
Rahmenfarbe	Grau   Blau
HMV-Nr.	18.50.02.2115

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen

# PYRO LIGHT

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUCH ALS  
XL PRODUKT  
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT\*\*  
AB 16,2 KG



BREITE  
SB + 200 MM



HÖHE  
945 MM



LÄNGE\*  
1040 MM



NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

# PYRO LIGHT

## LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 6“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- winkleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Anpassrücken
- Stahl Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kombi Seitenteile (desk & lang) höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Sitzhöhenumbau
- Rückenrohr ohne Lumbalknick
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Radauslegersatz Hemi (vorne)
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Transitumbau (13“ Bereifung)

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	380 - 520 mm
Sitztiefe	420 - 440 mm
Sitzhöhe vorne***	460 - 490 mm
Sitzhöhe hinten***	440 - 480 mm
Rückenhöhe***	400 - 440 mm
Rückenwinkel	100°
Sitzwinkel	0 - 4,5°
Unterschenkellängen	460 - 540 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1040 mm
Gesamtlänge**	810 mm
Gesamthöhe	945 mm
Rahmenfarbe	Silber   Blau
HMV-Nr.	18.50.02.2054

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen



AUCH ALS  
SL PRODUKT  
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT\*\*  
AB 16,5 KG

BREITE  
SB + 200 MM

HÖHE  
935 MM

LÄNGE\*  
1080 MM

NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- Sitzhöhe einstellbar
- Stahl Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Infusions- und Oxygenflaschenhalter
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

#### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne***	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten***	450 - 490 mm
Rückenhöhe***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	4°
Unterschenkellängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1080 mm
Gesamtlänge**	775 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.2095

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen





LEERGEWICHT  
AB 10,2 KG



BREITE  
645 MM  
680 MM



HÖHE  
890 MM



LÄNGE\*  
990 MM  
1030 MM



NUTZER  
GEWICHT  
100 KG

\*mit Beinstütze

**AUSSTATTUNG**

- Lenkräder 6“ (PU)
- Antriebsräder 13“ | 22“ (PU)
- Schraubachsen
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Rücken zur Hälfte abklappbar
- Seitenteile mit Armpolster

**ZUBEHÖR**

- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatten hochklappbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse (bei 22“ Antriebsrädern)
- Feststellbremse für Begleitperson (bei 13“ Antriebsrädern)
- Ankipphilfe
- Wadenband

**TECHNISCHE DATEN**

	13“ REIFEN	22“ REIFEN
Sitzbreite	450 mm	450 mm
Sitztiefe	390 mm	390 mm
Sitzhöhe vorne***	480 mm	480 mm
Sitzhöhe hinten***	460 mm	460 mm
Rückenhöhe***	430 mm	430 mm
Rückenwinkel	74°	75°
Sitzwinkel	3,7°	3,5°
Unterschenkellängen	400 - 480 mm	410 - 490 mm
Gesamtbreite	645 mm	680 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	280 mm	340 mm
Gesamtlänge*	990 mm	1030 mm
Gesamthöhe	890 mm	890 mm
Rahmenfarbe	Grau	Grau

\*mit Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen



#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Steckachsen
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzkissen anatomisch geformt
- verstellbare Seiten- und Kniepelotten
- Rückenhöhenverstellung
- Komfortrücken
- Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rücken Inkontinenzbezug
- dreifach verstellbare Kopfstütze
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar und tiefeinstellbar
- gepolsterten Armauflagen
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschwenk- und abnehmbar
- Fußplattenwinkel verstellbar
- Wadenpolster
- Fersenbänder
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- passive Beleuchtung
- Kippschutzrollen

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Abduktionspolster
- Kopfstützenverlängerung
- Beckengurt
- Therapietisch
- Armauflage (Hemiplegiker)

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Sitzbreite (Variante 01)</b>	360 - 430 mm
<b>Sitzbreite (Variante 02)</b>	430 - 500 mm
<b>Sitztiefe</b>	420 - 480 mm
<b>Sitzhöhe***</b>	415 mm
<b>Rückenhöhe***</b>	500 - 620 mm
<b>Rückenwinkel</b>	-3 - 43°
<b>Sitzwinkel</b>	0° - 15°
<b>Fußplattenwinkel</b>	0° - 25°
<b>Unterschenkellängen</b>	400 - 490 mm
<b>Gesamtbreite (Variante 01)</b>	680 mm
<b>Gesamtbreite (Variante 02)</b>	730 mm
<b>Gesamtlänge*</b>	1040 mm
<b>Gesamtlänge**</b>	840 mm
<b>Gesamthöhe</b>	900 - 1200 mm
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthrazit
<b>HMV-Nr.</b>	18.50.02.7047
<b>PHMV-Nr.</b>	50.45.07.2023



LEERGEWICHT\*\*  
38,7 KG (VAR. 1)  
40,2 KG (VAR. 2)

BREITE  
680 MM (VAR. 1)  
730 MM (VAR. 2)

HÖHE  
900 - 1200 MM

LÄNGE\*  
1040 MM

NUTZER  
GEWICHT  
125 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen

AUCH ALS  
SL PRODUKT  
ERHÄLTlich



#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Steckachsen
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzkissen
- Rückenhöhenverstellung
- Komfortrücken
- Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt
- Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rücken Inkontinenzbezug
- dreifach verstellbare Kopfstütze
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar und tiefenverstellbar
- gepolsterten Armauflagen
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschwenk- und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Wadenpolster
- Kniepelotten
- Fersenbänder
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Abduktionspolster
- verstellbare Seitenpelotten
- Kopfstützenverlängerung
- Bremshebelverlängerung
- Beckengurt
- Infusions-/Oxygenflaschenhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Armauflage (Hemiplegiker)
- Transitumbau (12“ Bereifung)

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Sitzbreite</b>	390 - 515 mm
<b>Sitztiefe</b>	420 - 480 mm
<b>Sitzhöhe***</b>	430 mm
<b>Rückenhöhe***</b>	580 - 640 mm
<b>Rückenwinkel</b>	0° - 44°
<b>Sitzwinkel</b>	0° - 15°
<b>Kniewinkel</b>	90°
<b>Fußbrettwinkel</b>	10° - -18°
<b>Unterschenkellängen</b>	390 - 520 mm
<b>Gesamtbreite</b>	680 mm
<b>Gesamtlänge*</b>	1200 mm
<b>Gesamtlänge**</b>	850 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1020 mm
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthrakit
<b>HMV-Nr.</b>	18.50.02.7057
<b>PHMV-Nr.</b>	50.45.07.2028



LEERGEWICHT\*\*  
AB 30,8 KG



BREITE  
SB + 190 MM



HÖHE  
1020 MM



LÄNGE\*  
1200 MM



NUTZER  
GEWICHT  
130 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen



#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7“ (PU)
- Antriebsräder 24“ (PU)
- Rückenwinkel verstellbar
- Rückenlehnenverlängerung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- höhenverstellbare Nackenstütze gepolstert und abnehmbar
- Seitenteile abnehmbar
- gepolsterten Armauflagen verlängert
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschwenk- und abnehmbar
- Fußplatten hochklappbar
- Wadenpolster
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Feststellbremse
- Kippschutzrollen
- Faltsperre
- passive Beleuchtung

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt
- Therapietisch

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Sitzbreite</b>	400 - 480 mm
<b>Sitztiefe</b>	420 mm
<b>Sitzhöhe vorne***</b>	500 mm
<b>Rückenhöhe***</b>	430 mm
<b>Rückenhöhe mit Verlängerung</b>	840 mm
<b>Rückenwinkel</b>	4° - 30°   82°****
<b>Sitzwinkel</b>	4°
<b>Gesamtbreite</b>	700 mm
<b>Gesamtlänge*</b>	1265 mm
<b>Gesamtlänge**</b>	940 mm
<b>Gesamthöhe</b>	880 -1330 mm
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthrazit
<b>HMV-Nr.</b>	18.50.02.5039



LEEREWICHT\*\*  
AB 25,4 KG



BREITE  
700 MM



HÖHE  
880 - 1330 MM



LÄNGE\*  
1265 MM



NUTZER  
GEWICHT  
120 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen \*\*\*\*ohne HMV Zulassung





#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 4 - 7"
- Antriebsräder 22 | 24"
- Steckachsen
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Anpassrücken
- geschlossener Vorderrahmen
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kleiderschutz Seitenteil
- Beinstützen mit Fußbrett
- Fußbrett winkelverstellbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Greifreifenabstand einstellbar
- Wadenband

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- PU- oder Luftbereifung (Schwalbe Marathon Plus)
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Beckengurt
- Ankipphilfe
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil steck- und höhenverstellbar
- Rückenwinkelverstellung
- Speichenschutz transparent
- Stockhalter
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

#### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	360 - 520 mm
Sitztiefe	360 - 540 mm
Sitzhöhe vorne***	490 - 560 mm
Sitzhöhe hinten***	420 - 520 mm
Rückenhöhe***	275 - 400 mm
Rückenwinkel	75° - 99°
Kniewinkel	108°
Unterschenkellängen	430 - 535 mm
Gesamtbreite	SB + 185 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	300 mm
Gesamtlänge*	910 - 1010 mm
Gesamthöhe	820 mm
Rahmenfarbe	schwarz, weiß, blau, rot
HMV-Nr.	18.50.03.0200



LEERGEWICHT\*\*  
AB 13,4 - 14,8 KG

BREITE  
SB + 185 MM

HÖHE  
820 MM

LÄNGE\*  
910 - 1010 MM

NUTZER  
GEWICHT  
135 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen



#### AUSSTATTUNG

- Lenkräder 4 - 7"
- Antriebsräder 22 | 24"
- Steckachsen
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Anpassrücken
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kleiderschutz Seitenteil
- Beinstützen abschwengens abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Greifreifenabstand einstellbar

#### ZUBEHÖR & OPTIONEN

- PU- oder Luftbereifung
- Luftbereifung (Schwalbe Marathon Plus)
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Beckengurt
- Ankipphilfe
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Rückenwinkelverstellung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Speichenschutz transparent
- Stockhalter
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Wadenband

#### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	360 - 520 mm
Sitztiefe	360 - 520 mm
Sitzhöhe vorne***	490 - 560 mm
Sitzhöhe hinten***	420 - 520 mm
Rückenhöhe***	275 - 400 mm
Rückenwinkel	75° - 99°
Kniewinkel	105°
Unterschenkellängen	430 - 510 mm
Gesamtbreite	SB + 185 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	300 mm
Gesamtlänge*	1010 - 1120 mm
Gesamtlänge**	760 - 870 mm
Gesamthöhe	820 mm
Rahmenfarbe	schwarz, weiß, blau, rot
HMV-Nr.	18.50.03.0200



LEERGEWICHT\*\*  
AB 13,8 - 15 KG



BREITE  
SB + 185 MM



HÖHE  
820 MM




LÄNGE\*  
1010 - 1120 MM



NUTZER  
GEWICHT  
135 KG

\*mit Beinstütze \*\* bei Sitzbreite von 430 mm

\*mit Beinstützen \*\* ohne Beinstützen \*\*\*ohne Sitzkissen

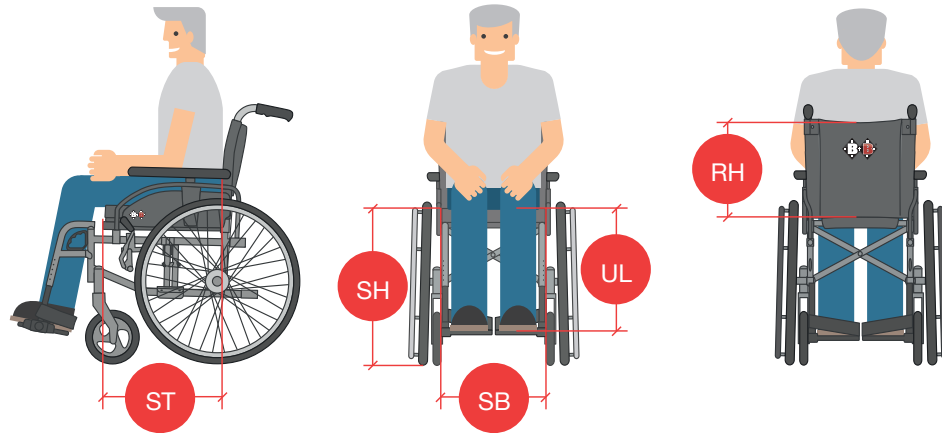

### Sitztiefe (ST)

Um eine ideale Sitzhaltung, eine gleichmäßige Druckverteilung und eine stabile Beinführung zu gewährleisten, ist die Sitztiefe von großer Wichtigkeit. Die Messung erfolgt von der Vorderkante des Rückenrohrs bis zur Vorderkante der Sitzbespannung.

### Sitzbreite (SB)

Für die Sitzbreite misst man am Rollstuhl den Abstand zwischen den Seitenteilen. Am Körper wird die breiteste Stelle des Beckens im Sitzen gemessen. Die Faustregel lautet: Gesäßbreite + 4 cm (2 cm auf jeder Seite). Zwischen Hüfte und Seitenteil sollte allerhöchstens eine flache Hand passen.

### Unterschenkelänge (UT)


Die Unterschenkelänge bestimmt die Position des Fußbretts, welches sich in einem Mindestabstand von drei Zentimetern vom Boden befinden sollte. Die Knie sind im 90°-Winkel gebeugt, die Füße stehen stabil auf dem Fußbrett. Gemessen wird von der Kniekehle bis zur Unterkante der Fußsohle, inklusive Schuh. Am Rollstuhl misst man von der Oberkante der Sitzfläche bis zur Oberkante der Fußplatten, bzw. des Fußbretts. Dabei unbedingt das Sitzkissen berücksichtigen!

### Sitzhöhe (SH)

Man unterscheidet zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe. Die beiden Einstellungen beeinflussen maßgeblich die Sitzhaltung und ermöglichen ein optimales Antreiben des Rollstuhls. Die hintere Sitzhöhe bestimmt, wie tief man zwischen den Antriebsrädern sitzt. Das hat Auswirkungen auf den Zugriff auf die Greifreifen. Die vordere Sitzhöhe bestimmt die Sitzneigung. Eine optimale Sitzhöhe wird erzielt, wenn unter dem Fußbrett mindestens drei Zentimeter Spielraum sind und die Handflächen bei nach unten hängenden Armen in etwa über der Radnabe liegen.

### Rückenhöhe (RH)

Die Höhe der Rückenlehne ist abhängig von der individuellen Behinderung. Am Rollstuhl wird von der Oberkante des Sitzrohrs bis zur Oberkante des Rückengurts gemessen. Möchte man sich mit dem Rollstuhl selbst fortbewegen, sollte die Rückenlehne etwa einen Fingerbreit (1 - 2 cm) unterhalb der Schulterblätter enden. So verfügt der Nutzer über ausreichend Spielraum für die Schulterblätter, um die Greifreifen gut bedienen zu können.

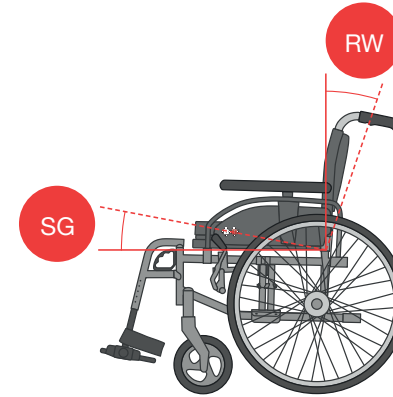


### Sitzwinkel (SG)

Das Sitzgefälle wird den individuellen Anforderungen des Nutzers entsprechend angepasst. Als optimal gilt ein Sitzgefälle, das vorne höher ist als hinten. In dieser Position ist das Bedienen der Greifreifen am einfachsten und zeigt die größte Wirkung.

### Rückenwinkel (RW)

Die Höhe der Rückenlehne hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung des Nutzers ab. Um ein möglichst aktives Sitzen zu ermöglichen, sollte die Rückenlehne einen Fingerbreit unterhalb der Schulterblätter enden. Um ein Vorrutschen zu vermeiden, darf der Rückenwinkel nicht zu aufrecht sein.

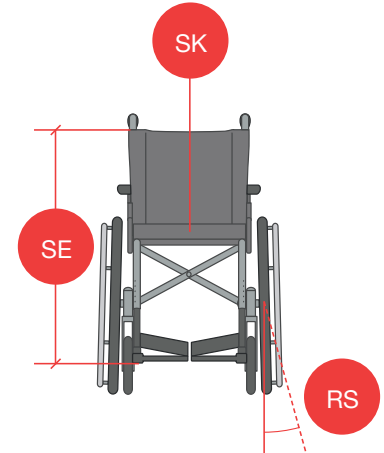

### Sitzkissen (SK)

Optional kann ein Sitzkissen gewählt werden. Es kann die Druckverteilung verbessern und somit der Entlastung dienen (Antidekubitus). Zusätzlich können Fehlhaltungen korrigiert und die Luftzirkulation verbessert werden.

### Sitzeinheit (SE)

Die Sitzeinheit ist die Basis für eine gesunde Sitzhaltung. Eine optimale Balance zwischen Stützfunktion und Druckverteilung ermöglicht stundenlanges Sitzen und unterstützt den Nutzer in seiner Aktivität.

### Radsturz (RS)

Ein Rollstuhl mit Radsturz lässt sich einfacher bewegen und ist wendiger. Die nach innen geneigten Antriebsräder erhöhen zusätzlich die Stabilität. Sport- und Kinderrollstühle verfügen in der Regel immer über einen Radsturz.



**Sie haben Fragen  
zu Produkten oder  
brauchen Hilfe?  
Wir helfen gerne!**

**KUNDENSERVICE**  
+49 (0) 72 48 | 92 0 92

**MAIL**  
info@bischoff-bischoff.de

**INTERNET**  
www.bischoff-bischoff.com

## NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Bischoff & Bischoff GmbH**  
Im Stöckmädle 13  
D-76307 Karlsbad  
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92  
info@bischoff-bischoff.de  
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH  
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische  
Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße  
unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von  
+/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte  
können in der Realität leicht abweichen.  
Stand: August 2024  
© Bischoff & Bischoff GmbH



[bischhoff-bischoff.com](http://bischhoff-bischoff.com)

