

TECHNISCHE DATEN

- __ Sitzfläche: 450 x 260 mm
- __ Sitzhöhe: 520 mm
- __ Griffhöhe: 845 – 965 mm
- __ Gesamtbreite: 600 mm
- __ Gesamtbreite gefaltet: 245 mm
- __ Gesamthöhe: 845 – 965 mm
- __ Gesamtlänge: 690 mm
- __ Gesamtgewicht: 6,7 kg*
- __ Nutzergewicht: 136 kg
- __ Wenderadius: 851 mm
- __ Versorgungsgröße: 1,65 – 1,90 m
- __ Material: Aluminium
- __ Rahmenfarbe: Kieselgrau
- __ HMV-Nr.: 10.50.04.1280


* Gewicht ohne Tasche und Rückengurt

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten
Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: November 2025
© Bischoff & Bischoff GmbH

www.bischoff-bischoff.com

Fachhändler:



Der Leichtgewichttrollator
BY KETTLER

BELIVA



Enjoy mobility. 

BELIVA

Der Leichtgewichtrollator BY KETTLER

Der Leichtgewichtrollator Beliva – eine Innovation, die durch die erfolgreiche Kooperation der renommierten Unternehmen Kettler und Bischoff & Bischoff entstanden ist. Als erster Kettler Rollator setzt der Beliva neue Maßstäbe in puncto Design, Komfort, Sicherheit und Funktionalität.

Mit einem simplen Einhand-Faltmechanismus lässt sich der Beliva mühelos und ohne Kraftaufwand zusammenklappen und verstauen – ideal für unterwegs. Die stabilen, laufruhigen Räder sorgen für ein sanftes und sicheres Fahrgefühl, während die ergonomisch geformten Schiebegriffe ein komfortables Handling garantieren.

Die höhenverstellbaren Schiebegriffe und der Komfort-Rückengurt ermöglichen eine genaue Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Der Beliva hat im Rahmen verlegte Bowdenzüge und ist mit einer innenliegenden Radbremse ausgestattet. Dies bietet nicht nur ein ansprechendes, aufgeräumtes Design, sondern schützt auch die Bremse vor äußeren Einflüssen.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Feststellbremse, die den Rollator zuverlässig in der gewünschten Abstellposition hält. Dank der Doppel-Kreuzstrebe und dem stabilen Rahmen aus hochwertigem Aluminium verbindet der Beliva Langlebigkeit mit einem geringen Eigengewicht. Die abnehmbare Tasche bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für persönliche Gegenstände und lässt sich bei Bedarf leicht abnehmen und wieder anbringen.

Der Beliva – Ihr zuverlässiger Begleiter für mehr Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit im Alltag. Vertrauen Sie auf die Qualität und das Know-how von Kettler und Bischoff & Bischoff.

ergonomisch geformte Schiebegriffe

Feststellbremse

Komfort-Rückengurt höhenverstellbar

Doppel-Kreuzstrebe

Tasche abnehmbar


einfaches verstauen ohne Kraftaufwand mit dem Einhand-Faltmechanismus



Leergewicht
6,7 kg*



Nutzergewicht
136 kg

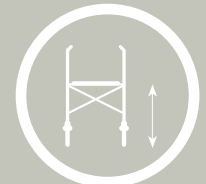

Sitzhöhe
520 mm



Versorgungsgröße
1,65 - 1,90 m



* Gewicht ohne Tasche und Rückengurt