


Enjoy mobility.



**MANUELLE
ROLLSTÜHLE**

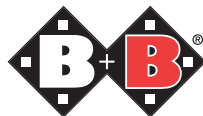

MODELLÜBERSICHT

MANUELLE ROLLSTÜHLE

Standardrollstühle



S-Eco 300

S-Eco 2

Leichtgewichtrollstühle



**Pyro
Light Optima**

**Pyro
Start Plus**

**Pyro
Light**

**Pyro
Start**

Vida

Multifunktionsrollstühle



Triton

Protego

S-VR

Adaptivrollstühle



BX 11

BX 11S

AUCH ALS SONDERGRÖSSEN ERHÄLTlich

XL Modell
(Belastbar bis 170 kg)

S-Eco 300 XL
Pyro Light XL
Pyro Light Optima XL

XXL Modell
(Belastbar bis 250 kg)

Econ XXL
Toilettenrollstuhl XXL

SL Modell
(Körpergröße bis 2,10 m)

Pyro Start Plus SL
Protego SL
TS-1 SL

AUCH ALS
XL PRODUKT
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT **
AB 18,4 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
935 MM



LÄNGE*
1080 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- Sitzhöhe einstellbar
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne***	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten***	450 - 490 mm
Rückenhöhe***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	4°
Unterschenkelängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1080 mm
Gesamtlänge**	775 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.0106

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen



AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Radstandverlängerung
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne ***	500 mm
Sitzhöhe hinten***	480 mm
Rückenhöhe ***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	3°
Unterschenkellängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 180 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	270 mm
Gesamtlänge*	1100 mm
Gesamtlänge**	815 mm
Gesamthöhe	925 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit
HMV-Nr.	18.50.02.0104



LEERGEWICHT**
AB 18,2 KG



BREITE
SB + 180 MM



HÖHE
925 MM



LÄNGE*
1100 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

PYRO LIGHT OPTIMA

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUCH ALS
XL PRODUKT
ERHÄLTlich



LEERGEGWICHT**
AB 16,8 KG

BREITE
SB + 200 MM

HÖHE
860 MM

LÄNGE*
1100 MM

NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

PYRO LIGHT OPTIMA

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Anpassrücken
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Seitenteile tiefen-, höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalnicken
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Lenkräder 6"
- Antriebsräder 22"
- Radstandverlängerung
- Sitzkissen 50 mm)
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	415 - 515 mm
Sitzhöhe vorne***	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten***	400 - 500 mm
Rückenhöhe***	400 - 460 mm
Rückenwinkel	100°
Sitzwinkel	0 - 11,5°
Unterschenkelängen	400 - 480 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	310 mm
Gesamtlänge*	1100 mm
Gesamtlänge**	840 mm
Gesamthöhe	860 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.2107

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

PYRO START PLUS

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUCH ALS
SL PRODUKT
ERHÄLTlich



LEERGEGWICHT **
AB 14,2 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
920 MM



LÄNGE*
1050 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

PYRO START PLUS

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- winkeleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Armlehnenhöhe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückensystem mit Lumbalnack
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	400 - 440 mm
Sitzhöhe vorne***	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten***	415 - 475 mm
Rückenhöhe***	420 - 440 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	0° - 4,5°
Unterschenkelängen	420 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	295 mm
Gesamtlänge*	1050 mm
Gesamtlänge**	800 mm
Gesamthöhe	920 mm
Rahmenfarbe	Grau Blau
HMV-Nr.	18.50.02.2115

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

AUCH ALS
XL PRODUKT
ERHÄLTlich



LEERGewicht**
AB 16,2 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
945 MM



LÄNGE*
1040 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 6" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- winkleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Anpassrücken
- Stahl Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kombi Seitenteile (desk & lang) höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Sitzhöhenumbau
- Rückenrohr ohne Lumbalknick
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Radauslegersatz Hemi (vorne)
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Transitumbau (13" Bereifung)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	380 - 520 mm
Sitztiefe	420 - 440 mm
Sitzhöhe vorne***	460 - 490 mm
Sitzhöhe hinten***	440 - 480 mm
Rückenhöhe***	400 - 440 mm
Rückenwinkel	100°
Sitzwinkel	0 - 4,5°
Unterschenkelängen	460 - 540 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1040 mm
Gesamtlänge**	810 mm
Gesamthöhe	945 mm
Rahmenfarbe	Silber Blau
HMV-Nr.	18.50.02.2054

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

AUCH ALS
SL PRODUKT
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT**
AB 16,5 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
935 MM



LÄNGE*
1080 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 8" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock
- Sitzhöhe einstellbar
- Stahl Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Duo Seitenteile (desk & lang) abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatten hochklappbar
- Fersenbänder
- Schiebegriffe (höhenverstellbar | ab 10/2026)
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Sitzkissen (50 mm)
- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandantrieb
- Beckengurt
- Kippschutzrollen
- Infusions- und Oxygenflaschenhalter
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Seitenteil mit Kombiarm-polster (höhenverstellbar)
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	370 - 520 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne***	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten***	450 - 490 mm
Rückenhöhe***	400 mm
Rückenwinkel	98°
Sitzwinkel	4°
Unterschenkelängen	360 - 500 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	290 mm
Gesamtlänge*	1080 mm
Gesamtlänge**	775 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.2095

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen



LEERGEWICHT
AB 10,2 KG



BREITE
645 MM
680 MM



HÖHE
890 MM



LÄNGE*
990 MM
1030 MM



NUTZER
GEWICHT
100 KG

*mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 6" (PU)
- Antriebsräder 13" | 22" (PU)
- Schraubachsen
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Rücken zur Hälfte abklappbar
- Seitenteile mit Armpolster

ZUBEHÖR

- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatten hochklappbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse (bei 22" Antriebsräder)
- Feststellbremse für Begleitperson (bei 13" Antriebsräder)
- Ankipphilfe

- Wadenband

TECHNISCHE DATEN

	13" REIFEN	22" REIFEN
Sitzbreite	450 mm	450 mm
Sitztiefe	390 mm	390 mm
Sitzhöhe vorne***	480 mm	480 mm
Sitzhöhe hinten***	460 mm	460 mm
Rückenhöhe***	430 mm	430 mm
Rückenwinkel	74°	75°
Sitzwinkel	3,7°	3,5°
Unterschenkellängen	400 - 480 mm	410 - 490 mm
Gesamtbreite	645 mm	680 mm
Gesamtbreite (gefaltete)	280 mm	340 mm
Gesamtlänge*	990 mm	1030 mm
Gesamthöhe	890 mm	890 mm
Rahmenfarbe	Grau	Grau

*mit Beinstützen ***ohne Sitzkissen



AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzkissen anatomisch geformt
- verstellbare Seiten- und Kniepelotten
- Rückenhöhenverstellung
- Komfortrücken
- Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rücken Inkontinenzbezug
- dreifach verstellbare Kopfstütze
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar und tiefeinstellbar
- gepolsterten Armauflagen
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschwenk- und abnehmbar
- Fußplattenwinkel verstellbar
- Wadenpolster
- Fersenbänder
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- passive Beleuchtung
- Kippschutzrollen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Abduktionspolster
- Kopfstützenverlängerung
- Beckengurt
- Therapietisch
- Armauflage (Hemiplegiker)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite (Variante 01)	360 - 430 mm
Sitzbreite (Variante 02)	430 - 500 mm
Sitztiefe	420 - 480 mm
Sitzhöhe***	415 mm
Rückenhöhe***	500 - 620 mm
Rückenwinkel	-3 - 43°
Sitzwinkel	0° - 15°
Fußplattenwinkel	0° - 25°
Unterschenkellängen	400 - 490 mm
Gesamtbreite (Variante 01)	680 mm
Gesamtbreite (Variante 02)	730 mm
Gesamtlänge*	1040 mm
Gesamtlänge**	840 mm
Gesamthöhe	900 - 1200 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit
HMV-Nr.	18.50.02.7047
PHMV-Nr.	50.45.07.2023



LEERGEWICHT**
38,7 KG (VAR. 1)
40,2 KG (VAR. 2)



BREITE
680 MM (VAR. 1)
730 MM (VAR. 2)



HÖHE
900 - 1200 MM



LÄNGE*
1040 MM



NUTZER
GEWICHT
125 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

AUCH ALS
SL PRODUKT
ERHÄLTlich



AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Steckachsen
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzkissen
- Rückenhöhenverstellung
- Komfortrücken
- Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt
- Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rücken Inkontinenzbezug
- dreifach verstellbare Kopfstütze
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar und tiefenverstellbar
- gepolsterten Armauflagen
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschwinkelbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Wadenpolster
- Knieelotten
- Fersenbänder
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Abduktionspolster
- verstellbare Seitenpelotten
- Kopfstützenverlängerung
- Bremshebelverlängerung
- Beckengurt
- Infusions-/Oxygenflaschenhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Armauflage (Hemiplegiker)
- Transitumbau (12" Bereifung)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	390 - 515 mm
Sitztiefe	420 - 480 mm
Sitzhöhe***	430 mm
Rückenhöhe***	580 - 640 mm
Rückenwinkel	0° - 44°
Sitzwinkel	0° - 15°
Kniewinkel	90°
Fußbrettwinkel	10° - -18°
Unterschenkelängen	390 - 520 mm
Gesamtbreite	680 mm
Gesamtlänge*	1200 mm
Gesamtlänge**	850 mm
Gesamthöhe	1020 mm
Rahmenfarbe	Antrazit
HMV-Nr.	18.50.02.7057
PHMV-Nr.	50.45.07.2028



LEERGEWICHT**
AB 30,8 KG



BREITE
SB + 190 MM



HÖHE
1020 MM



LÄNGE*
1200 MM



NUTZER
GEWICHT
130 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen



AUSSTATTUNG

- Lenkräder 7" (PU)
- Antriebsräder 24" (PU)
- Rückenwinkel verstellbar
- Rückenlehnenverlängerung
- Stahl Seitenrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- höhenverstellbare Nackenstütze gepolstert und abnehmbar
- Seitenteile abnehmbar
- gepolsterten Armauflagen verlängert
- Beinstützen winkelverstellbar mit Längenausgleich, nach außen abschweng- und abnehmbar
- Fußplatten hochklappbar
- Wadenpolster
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Feststellbremse
- Kippschutzrollen
- Faltsperre
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt
- Therapietisch

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	400 - 480 mm
Sitztiefe	420 mm
Sitzhöhe vorne***	500 mm
Rückenhöhe***	430 mm
Rückenhöhe mit Verlängerung	840 mm
Rückenwinkel	4° - 30° 82°****
Sitzwinkel	4°
Gesamtbreite	700 mm
Gesamtlänge*	1265 mm
Gesamtlänge**	940 mm
Gesamthöhe	880 -1330 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit
HMV-Nr.	18.50.02.5039



LEEREWICHT**
AB 25,4 KG



BREITE
700 MM



HÖHE
880 - 1330 MM



LÄNGE*
1265 MM



NUTZER
GEWICHT
120 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen ****ohne HMV Zulassung

NEUES
MODELL
AB 2027



LEERGEWICHT**
AB 13,4 - 14,8 KG



BREITE
SB + 185 MM



HÖHE
820 MM



LÄNGE*
910 - 1010 MM



NUTZER
GEWICHT
135 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 4 - 7"
- Antriebsräder 22 | 24"
- Steckachsen
- winkleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Anpassrücken
- geschlossener Vorderrahmen
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kleiderschutz Seitenteil
- Beinstützen mit Fußbrett
- Fußbrett winkelverstellbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Greifreifenabstand einstellbar
- Wadenband

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- PU- oder Luftbereifung (Schwalbe Marathon Plus)
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Beckengurt
- Ankipphilfe
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil steck- und höhenverstellbar
- Rückenwinkelverstellung
- Speichenschutz transparent
- Stockhalter
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	360 - 520 mm
Sitztiefe	360 - 540 mm
Sitzhöhe vorne***	490 - 560 mm
Sitzhöhe hinten***	420 - 520 mm
Rückenhöhe***	275 - 400 mm
Rückenwinkel	75° - 99°
Kniewinkel	108°
Unterschenkellängen	430 - 535 mm
Gesamtbreite	SB + 185 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	300 mm
Gesamtlänge*	910 - 1010 mm
Gesamthöhe	820 mm
Rahmenfarbe	schwarz, weiß, blau, rot
HMV-Nr.	18.50.03.0200

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

NEUES
MODELL
AB 2027



LEERGEWICHT**
AB 13,8 - 15 KG



BREITE
SB + 185 MM



HÖHE
820 MM



LÄNGE*
1010 - 1120 MM



NUTZER
GEWICHT
135 KG

*mit Beinstütze ** bei Sitzbreite von 430 mm

AUSSTATTUNG

- Lenkräder 4 - 7"
- Antriebsräder 22 | 24"
- Steckachsen
- winkleinstellbare Castorbuchse
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Sitzwinkel verstellbar
- Anpassrücken
- Aluminium Seitenrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitz- & Rückenbezug (Nylon)
- Kleiderschutz Seitenteil
- Beinstützen abschwängbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Greifreifenabstand einstellbar


ZUBEHÖR & OPTIONEN

- PU- oder Luftbereifung
- Luftbereifung (Schwalbe Marathon Plus)
- Sitzkissen (50 mm)
- Trommelbremse
- Beckengurt
- Ankipphilfe
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil (höhenverstellbar)
- Rückenwinkelverstellung
- Beinstützen (waagrecht verstellbar)
- Amputationsbeinstützen
- Speichenschutz transparent
- Stockhalter
- Schiebegriffe (höhenverstellbar)
- Wadenband

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	360 - 520 mm
Sitztiefe	360 - 520 mm
Sitzhöhe vorne***	490 - 560 mm
Sitzhöhe hinten***	420 - 520 mm
Rückenhöhe***	275 - 400 mm
Rückenwinkel	75° - 99°
Kniewinkel	105°
Unterschenkellängen	430 - 510 mm
Gesamtbreite	SB + 185 mm
Gesamtbreite (gefaltet)	300 mm
Gesamtlänge*	1010 - 1120 mm
Gesamtlänge**	760 - 870 mm
Gesamthöhe	820 mm
Rahmenfarbe	schwarz, weiß, blau, rot
HMV-Nr.	18.50.03.0200

*mit Beinstützen ** ohne Beinstützen ***ohne Sitzkissen

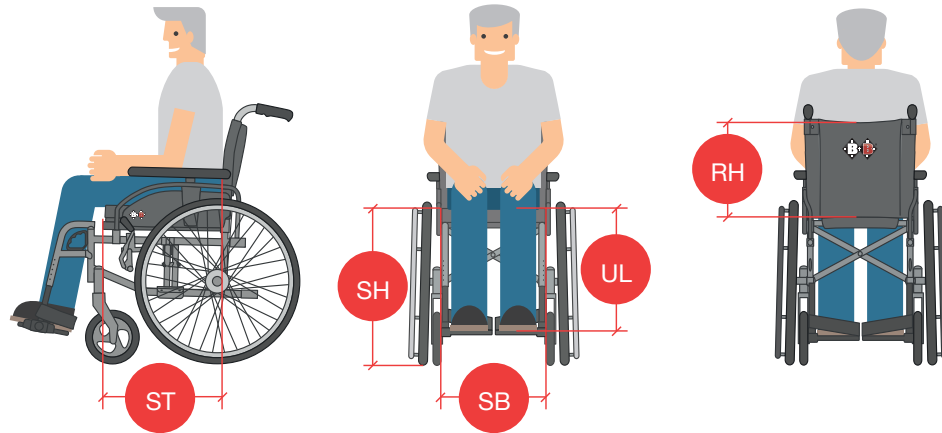

Sitztiefe (ST)

Um eine ideale Sitzhaltung, eine gleichmäßige Druckverteilung und eine stabile Beinführung zu gewährleisten, ist die Sitztiefe von großer Wichtigkeit. Die Messung erfolgt von der Vorderkante des Rückenrohrs bis zur Vorderkante der Sitzbespannung.

Sitzbreite (SB)

Für die Sitzbreite misst man am Rollstuhl den Abstand zwischen den Seitenteilen. Am Körper wird die breiteste Stelle des Beckens im Sitzen gemessen. Die Faustregel lautet: Gesäßbreite + 4 cm (2 cm auf jeder Seite). Zwischen Hüfte und Seitenteil sollte allerhöchstens eine flache Hand passen.

Unterschenkelänge (UT)


Die Unterschenkelänge bestimmt die Position des Fußbretts, welches sich in einem Mindestabstand von drei Zentimetern vom Boden befinden sollte. Die Knie sind im 90°-Winkel gebeugt, die Füße stehen stabil auf dem Fußbrett. Gemessen wird von der Kniekehle bis zur Unterkante der Fußsohle, inklusive Schuh. Am Rollstuhl misst man von der Oberkante der Sitzfläche bis zur Oberkante der Fußplatten, bzw. des Fußbretts. Dabei unbedingt das Sitzkissen berücksichtigen!

Sitzhöhe (SH)

Man unterscheidet zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe. Die beiden Einstellungen beeinflussen maßgeblich die Sitzhaltung und ermöglichen ein optimales Antreiben des Rollstuhls. Die hintere Sitzhöhe bestimmt, wie tief man zwischen den Antriebsrädern sitzt. Das hat Auswirkungen auf den Zugriff auf die Greifreifen. Die vordere Sitzhöhe bestimmt die Sitzneigung. Eine optimale Sitzhöhe wird erzielt, wenn unter dem Fußbrett mindestens drei Zentimeter Spielraum sind und die Handinnenflächen bei nach unten hängenden Armen in etwa über der Radnabe liegen.

Rückenhöhe (RH)

Die Höhe der Rückenlehne ist abhängig von der individuellen Behinderung. Am Rollstuhl wird von der Oberkante des Sitzrohrs bis zur Oberkante des Rückengurts gemessen. Möchte man sich mit dem Rollstuhl selbst fortbewegen, sollte die Rückenlehne etwa einen Fingerbreit (1 - 2 cm) unterhalb der Schulterblätter enden. So verfügt der Nutzer über ausreichend Spielraum für die Schulterblätter, um die Greifreifen gut bedienen zu können.

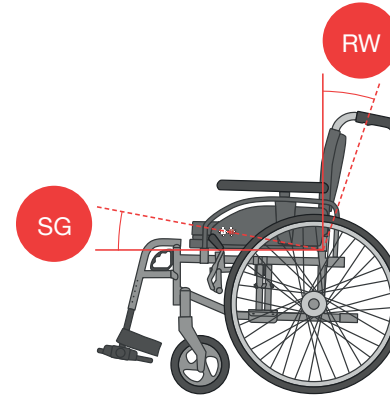


Sitzwinkel (SG)

Das Sitzgefälle wird den individuellen Anforderungen des Nutzers entsprechend angepasst. Als optimal gilt ein Sitzgefälle, das vorne höher ist als hinten. In dieser Position ist das Bedienen der Greifreifen am einfachsten und zeigt die größte Wirkung.

Rückenwinkel (RW)

Die Höhe der Rückenlehne hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung des Nutzers ab. Um ein möglichst aktives Sitzen zu ermöglichen, sollte die Rückenlehne einen Fingerbreit unterhalb der Schulterblätter enden. Um ein Vorrutschen zu vermeiden, darf der Rückenwinkel nicht zu aufrecht sein.

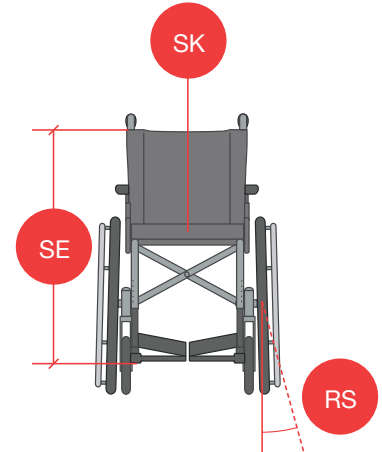

Sitzkissen (SK)

Optional kann ein Sitzkissen gewählt werden. Es kann die Druckverteilung verbessern und somit der Entlastung dienen (Antidekubitus). Zusätzlich können Fehlhaltungen korrigiert und die Luftzirkulation verbessert werden.

Sitzeinheit (SE)

Die Sitzeinheit ist die Basis für eine gesunde Sitzhaltung. Eine optimale Balance zwischen Stützfunktion und Druckverteilung ermöglicht stundenlanges Sitzen und unterstützt den Nutzer in seiner Aktivität.

Radsturz (RS)

Ein Rollstuhl mit Radsturz lässt sich einfacher bewegen und ist wendiger. Die nach innen geneigten Antriebsräder erhöhen zusätzlich die Stabilität. Sport- und Kinderrollstühle verfügen in der Regel immer über einen Radsturz.

**Sie haben Fragen
zu Produkten oder
brauchen Hilfe?
Wir helfen gerne!**

KUNDENSERVICE

+49 (0) 72 48 | 92 0 92

MAIL

info@bischoff-bischoff.de

INTERNET

www.bischoff-bischoff.com

NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13

D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92

info@bischoff-bischoff.de

www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH

Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen.

Stand: August 2026

© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

