

TECHNISCHE DATEN

- __Sitzbreite: 420 mm
- __Sitztiefe: 430 mm
- __Sitzhöhe vorne: 520 mm***
- __Gesamtbreite: 610 mm
- __Gesamtlänge: 1090 mm**
- __Gesamthöhe: 1040 mm
- __Max. Nutzergewicht: 120 kg
- __Leergewicht: 36,6 kg*
- __Geschwindigkeit: 6 km/h
- __Reichweite: ca. 25 km
- __Max. Steigfähigkeit: 10° | 17,6 %
- __Max. Hindernishöhe: 40 mm
- __Wendebereich: 1120 mm
- __Motor: 2 x 180 W, max. 4200 UPM
- __Batterie: 24 V | 30 Ah
- __Rahmenfarbe: schwarz
- __HMV Nr.: 18.50.07.0036

www.bischoff-bischoff.com

Fachhändler:

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de


Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: September 2026
© Bischoff & Bischoff GmbH

MIT
HMV
NR.

Der faltbare Outdoor Elektro- rollstuhl



Enjoy mobility.

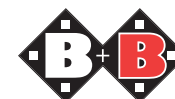

VIA⁺

der faltbare Outdoor Elektrorollstuhl

Der Via+ verbindet komfortables Fahren, durchdachte Technik und maximale Flexibilität in einem modernen, faltbaren Elektrorollstuhl. Ob im Alltag, beim Einkaufsbummel, auf Ausflügen oder auf Reisen – der Via+ begleitet Sie zuverlässig und unterstützt Sie genau dort, wo Sie ihn brauchen.

Als Outdoor-Elektrorollstuhl überzeugt der Via+ mit seiner kompakten, wendigen Bauweise und hervorragenden Fahreigenschaften auf unterschiedlichsten Untergründen. Die großen **12,5-Zoll-Luftreifen** sorgen auch auf unebenen Wegen und gepflasterten Straßen für hohen Fahrkomfort. Hindernisse bis zu vier Zentimetern überwindet der Via+ souverän, während die **Vorderradfederung** kleinere Unebenheiten ausgleicht. Über das **PG Drive VSI Bedienpult** lässt er sich intuitiv, präzise und ohne großen Kraftaufwand steuern. Besonders praktisch im Alltag: Dank des **integrierten Faltmechanismus** lässt sich der Via+ schnell und unkompliziert zusammenfallen und bequem im Kofferraum transportieren. Auch im gefalteten Zustand kann er einfach geschoben und sicher abgestellt werden. Damit ist er der ideale Begleiter für Einkäufe, Arzttermine, Ausflüge und Reisen mit Auto, Bus oder Bahn.

Für zuverlässige Mobilität sorgen die abnehmbare, wartungsfreie **30-Ah-Lithium-Ionen-Batterie** und zwei **180-Watt-Motoren**. Damit erreicht der Via+ eine Reichweite von ca. 25 km und eine Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h. Die **LED-Beleuchtung** und StVZO-konforme Ausstattung sorgen zudem für Sicherheit bei Fahrten im Dunkeln.

Zum Lieferumfang gehören ein **Stockhalter**, ein **Sitzkissen** und eine praktische, **abnehmbare Tasche**.




GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 25 km

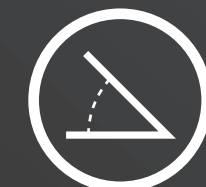

STIEGUNG

10° | 17,6 %



MOTOR

2 x 180 W